

# Zelo+

## Guia didático do firmware

---

Dispenser inteligente de medicamentos com 3 compartimentos  
ESP32 · servos · LCD I2C · Telegram · histórico de doses

Funcionamento explicado passo a passo,  
com o trecho de código de cada etapa

Projeto acadêmico Zelo+ · Setembro de 2026

Material pedagógico que explica, **passo a passo e na ordem em que as coisas acontecem**, como o dispenser Zelo+ funciona. Em cada etapa aparece só o **trecho de código** responsável por ela (o arquivo completo está em [src/main.cpp](#)).

## Sumário


- Parte A — Entendendo o projeto
  - A1. O que é o Zelo+
  - A2. Materiais e ligações
  - A3. Ambiente de desenvolvimento
  - A4. Cinco conceitos antes de começar
  - A5. A página do Zelo+ (tela completa)
- Parte B — O código, passo a passo
  - Passo 1 — Bibliotecas e pinos
  - Passo 2 — Estruturas de dados
  - Passo 3 — `setup()` : ligando tudo
  - Passo 4 — Wi-Fi sem senha no código (captive portal)
  - Passo 5 — Modo normal: relógio pela internet e rotas da página
  - Passo 6 — Memória permanente (Preferences)
  - Passo 7 — A página de cadastro
  - Passo 8 — Salvando o cadastro
  - Passo 9 — Movendo as portas (servos)
  - Passo 10 — O coração: `loop()` e a máquina de estados
  - Passo 11 — Conferindo os horários
  - Passo 12 — O alarme tocando
  - Passo 13 — O paciente aperta o botão
  - Passo 14 — Abastecer, repor e esvaziar
  - Passo 15 — Avisos pelo Telegram
  - Passo 16 — Histórico de doses
  - Passo 17 — Escrevendo no LCD
  - Passo 18 — Modo de teste
- Parte C — Juntando tudo
  - C1. Linha do tempo de uma dose
  - C2. Referência rápida
  - C3. Para praticar
- Parte D — Uso autônomo, sem o laptop (condicional)
  - D1. Condição para aplicar
  - D2. Por que o laptop não é necessário
  - D3. Opção A — carregador USB
  - D4. Opção B — fonte única (montagem definitiva)
  - D5. Opção C — bateria, power bank e "nobreak"
  - D6. Falta de energia e de internet
  - D7. Sugestão: módulo de relógio DS3231
  - D8. Resumo: qual montagem usar

# Parte A — Entendendo o projeto

## A1. O que é o Zelo+

O Zelo+ é um **dispenser automático de medicamentos** para pacientes (em especial idosos). Ele tem **3 compartimentos**, cada um com um remédio diferente e com uma porta movida por um servo motor.

**Rotina do dia a dia:**

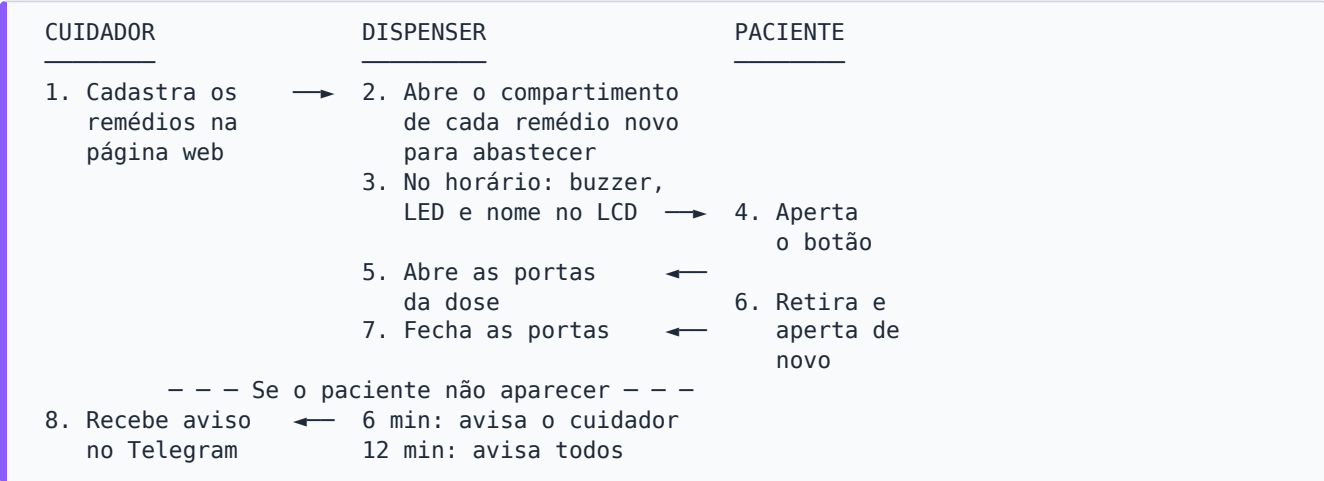


Tudo o que o dispenser precisa saber (remédios, horários, contatos, histórico) fica guardado na **memória interna** da placa e sobrevive a quedas de energia.

## A2. Materiais e ligações

| Componente                                        | Quantidade | Observação                           |
|---------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|
| ESP32 DevKit (30 pinos)                           | 1          | O "cérebro". Tem Wi-Fi embutido.     |
| Servo motor SG90                                  | 3          | Um por compartimento (porta).        |
| LCD 16x2 com módulo I2C (PCF8574, endereço 0x27 ) | 1          | Mostra relógio e mensagens.          |
| Buzzer <b>ativo</b>                               | 1          | Apita sozinho quando recebe energia. |
| LED + resistor 220-330 Ω                          | 1          | Pisca junto com o buzzer.            |
| Botão (push-button)                               | 1          | O paciente aperta para abrir/fechar. |
| Fonte externa 5 V (≥ 2 A)                         | 1          | Alimenta os servos.                  |
| Protoboard e jumpers                              | —          | Ligações.                            |

## Zelo+ — Diagrama de ligações (ESP32 DevKit 30 pinos)

3 servos (compartimentos) · LCD 16x2 I2C · buzzer ativo · LED · botão · fonte externa 5 V para os servos

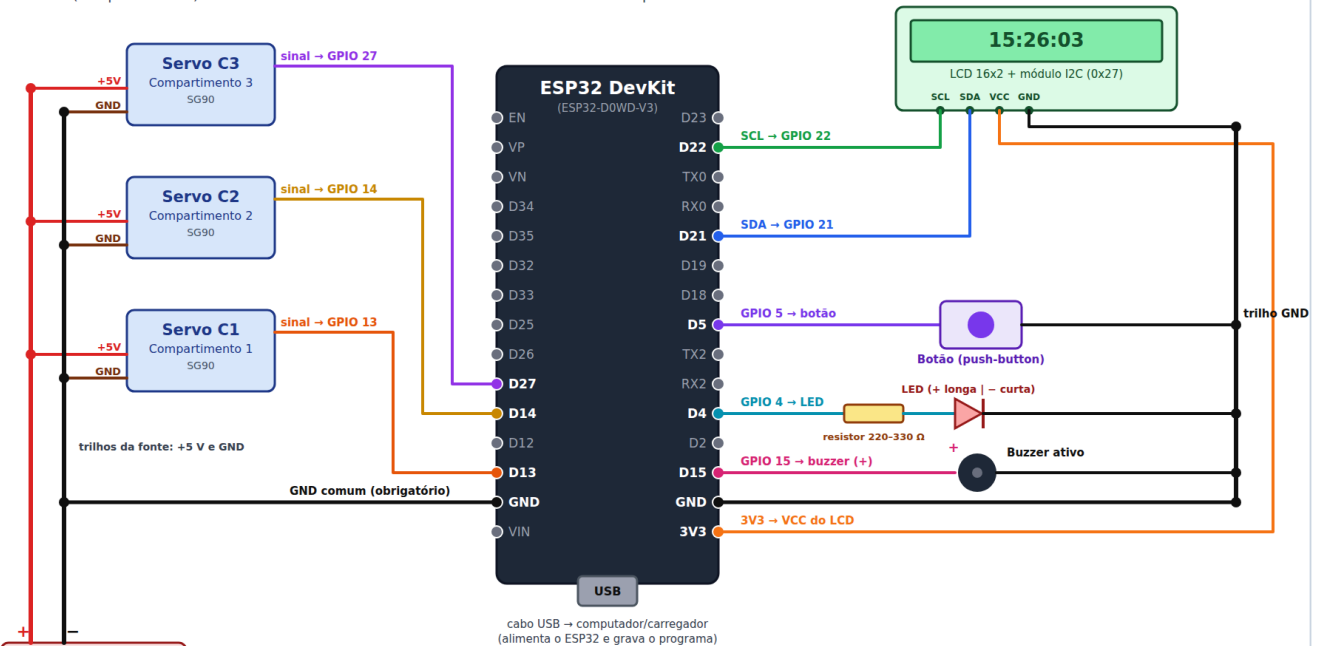

(versão vetorial, que pode ser ampliada sem perder qualidade: <docs/ligacoes.svg>)

| Ligação                       | Pino do ESP32     | Detalhe                            |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| Servo compartimento 1 (sinal) | GPIO 13           | +5 V e GND na <b>fonte externa</b> |
| Servo compartimento 2 (sinal) | GPIO 14           | +5 V e GND na <b>fonte externa</b> |
| Servo compartimento 3 (sinal) | GPIO 27           | +5 V e GND na <b>fonte externa</b> |
| LCD — SDA / SCL               | GPIO 21 / GPIO 22 | VCC → 3V3, GND → GND               |
| Botão                         | GPIO 5            | outra perna → GND (sem resistor)   |
| LED                           | GPIO 4            | via resistor; perna curta → GND    |
| Buzzer (+)                    | GPIO 15           | (-) → GND                          |
| Fonte externa (-)             | GND do ESP32      | <b>GND comum obrigatório</b>       |

**Por que uma fonte separada para os servos?** Um servo puxa muita corrente no momento em que começa a girar. Se ele for ligado no 3V3 do ESP32, a tensão cai e a placa reinicia. Por isso os servos usam uma fonte de 5 V própria, e o **GND da fonte é ligado ao GND do ESP32**: sem essa referência comum, o sinal do pino não é entendido pelo servo.

**Por que o GPIO 12 não foi usado?** Ele é um pino de "configuração de inicialização" do ESP32; se estiver com algo ligado na hora de ligar a placa, ela pode não iniciar.

## A3. Ambiente de desenvolvimento

- VSCode** com a extensão **PlatformIO**.
- Placa `esp32dev`, framework **Arduino** (a mesma linguagem do Arduino, em C++).

O arquivo `platformio.ini` diz ao PlatformIO qual placa usar e quais bibliotecas baixar:

```
[env:esp32dev]
platform = espressif32
board = esp32dev
framework = arduino
upload_port = COM3
monitor_speed = 115200
board_build.partitions = huge_app.csv
lib_deps =
    marcoschwartz/LiquidCrystal_I2C@^1.1.4
    madhephaestus/ESP32Servo@^3.0.5
    bblanchon/ArduinoJson@^7.0.4
```

- `upload_port`: porta USB onde a placa aparece no Windows (varia de PC para PC).
- `monitor_speed`: velocidade do **Serial Monitor**, onde a placa escreve mensagens.
- `huge_app.csv`: reserva mais espaço para o programa (a parte de internet segura, HTTPS, deixa o firmware grande).
- `lib_deps`: bibliotecas do LCD, dos servos e de leitura de JSON (usada no Telegram).

**Para gravar:** ✓ (Build) → → (Upload) → 🦗 (Serial Monitor), na barra azul do rodapé do VSCode.

## A4. Cinco conceitos antes de começar

1. **setup() e loop()** — todo programa Arduino tem essas duas funções. O `setup()` roda **uma vez** quando a placa liga; o `loop()` roda **para sempre**, milhares de vezes por segundo.
2. **millis() em vez de delay()** — `delay(1000)` congela a placa por 1 segundo (ela não lê o botão nem atende a página). Por isso o Zelo+ quase sempre usa `millis()`, que devolve "há quantos milissegundos a placa está ligada", e compara tempos: `cpp if (millis() - ultimaAtualizacao < 1000) return;` (se ainda não passou 1 segundo desde a última atualização, sai e tenta de novo na próxima volta do `loop()`, sem travar nada).
3. **Máquina de estados** — o dispenser está sempre em **um** estado (aguardando, tocando, porta aberta, abastecendo). Em cada estado ele faz coisas diferentes e, quando algo acontece, **muda de estado**. Isso deixa o comportamento previsível.
4. **Máscara de bits** — para dizer "compartimentos 1 e 3", o código usa um número em que cada **bit** representa um compartimento:

```
compartimento:  3 2 1
bits:           1 0 1  = 5  →  compartimentos 1 e 3
```

Assim uma única variável (`uint8_t`) guarda qualquer combinação de compartimentos.

1. **Memória permanente (Preferences/NVS)** — a variável comum some quando a energia cai. A biblioteca `Preferences` grava dados na **memória flash** da placa, que não se apaga ao desligar (como um pen drive).

## A5. A página do Zelo+ (tela completa)

É a página que o cuidador abre no celular, digitando o IP que aparece no LCD (ex.: `192.168.15.152`). As imagens abaixo foram geradas **pelo próprio firmware** (a função `handleRoot()` do Passo 7) com um cadastro de exemplo completo.

O visual segue três ideias, pensando em cuidadores e familiares com pouca familiaridade com tecnologia:

- **Letras e botões grandes**, com bom contraste.
- **Uma cor por compartimento** — 1 **azul**, 2 **verde**, 3 **roxo** — no cartão do remédio, na dica de abastecimento, na reposição e no histórico.

- **Menos informação na tela:** remédios, paciente, cuidador e familiares aparecem **recolhidos** (só a faixa com o nome); um toque abre os detalhes.

## ① Falta configurar o Telegram

**Zelo+**

Os avisos pelo Telegram ainda não estão prontos (falta: Ana Silva). [Configurar agora](#)

**Paulo Silva**  
Paciente abrir ▼

**Remédios**  
Cada remédio fica sempre no mesmo compartimento, identificado pela cor. Toque em um compartimento para ver ou mudar.
 

1 **Losartana**  
Compartimento 1 (azul) · 08:00 - 20:00 abrir ▼

2 **Metformina**  
Compartimento 2 (verde) · 12:00 abrir ▼

3 **Sinvastatina**  
Compartimento 3 (roxo) · 21:00 abrir ▼

**Contatos**

**Maria Souza**  
Cuidador(a) abrir ▼

**João Silva**  
Familiar abrir ▼

**Ana Silva**  
Familiar abrir ▼

+ Cadastrar familiar

**Salvar alterações**

**Repor remédio**  
[Abrir compartimento para reposição](#)

**Histórico de doses**  
93% das doses foram tomadas nos últimos 7 dias  

11 no horário

2 com atraso

1 sem acesso

1 Losartana: 86%

2 Metformina: 100%

3 Sinvastatina: 100%

Ver últimas doses (14) abrir ▼

[Trocar rede Wi-Fi](#)

**Avisos pelo Telegram** fechar ▲  
falta configurar  
O Zelo+ avisa o cuidador e os familiares pelo Telegram quando o paciente não pega o remédio.  
**Token do bot:**  

(salvo — deixe em branco para manter)

**Maria Souza** ✓  
123456789

**João Silva** ✓  
987654321

**Ana Silva (falta)**  
ID do Telegram, ex.: 123456789

Como configurar (passo a passo) abrir ▼

## ② Tudo configurado

**Zelo+**

**Paulo Silva**  
Paciente abrir ▼

**Remédios**  
Cada remédio fica sempre no mesmo compartimento, identificado pela cor. Toque em um compartimento para ver ou mudar.
 

1 **Losartana**  
Compartimento 1 (azul) · 08:00 - 20:00 abrir ▼

2 **Metformina**  
Compartimento 2 (verde) · 12:00 abrir ▼

3 **Sinvastatina**  
Compartimento 3 (roxo) · 21:00 abrir ▼

**Contatos**

**Maria Souza**  
Cuidador(a) abrir ▼

**João Silva**  
Familiar abrir ▼

**Ana Silva**  
Familiar abrir ▼

+ Cadastrar familiar

**Salvar alterações**

**Repor remédio**  
[Abrir compartimento para reposição](#)

**Histórico de doses**  
93% das doses foram tomadas nos últimos 7 dias  

11 no horário

2 com atraso

1 sem acesso

1 Losartana: 86%

2 Metformina: 100%

3 Sinvastatina: 100%

Ver últimas doses (14) abrir ▼

[Trocar rede Wi-Fi](#)

**Avisos pelo Telegram** abrir ▼  
configurado ✓

## ③ Blocos abertos

**Zelo+**

**Paulo Silva**  
Paciente abrir ▼

**Remédios**  
Cada remédio fica sempre no mesmo compartimento, identificado pela cor. Toque em um compartimento para ver ou mudar.
 

1 **Losartana**  
Compartimento 1 (azul) · 08:00 - 20:00 fechar ▲  
**Nome do remédio:**  

Losartana

**Horários:**  

08:00

20:00

+ Adicionar horário

Coloque Losartana no compartimento 1 (azul)

[Esvaziar o compartimento 1](#)

2 **Metformina**  
Compartimento 2 (verde) · 12:00 abrir ▼

3 **Sinvastatina**  
Compartimento 3 (roxo) · 21:00 abrir ▼

**Contatos**

**Maria Souza**  
Cuidador(a) abrir ▼

**João Silva**  
Familiar fechar ▲  
**Nome:**  

João Silva

**Celular:**  

(11) 91234-5678

[Remover este familiar](#)

**Ana Silva**  
Familiar abrir ▼

**Novo familiar**  
Familiar - opcional fechar ▲  
**Nome:**  
**Celular:**  

(11) 98765-4321

[Cancelar](#)

+ Cadastrar familiar

**Salvar alterações**

**Repor remédio**  
Qual remédio você vai repor?  

1 Losartana

2 **Metformina**

3 Sinvastatina

[Continuar](#)

[Cancelar](#)

- ① A familiar Ana ainda não tem ID do Telegram: aparece um **aviso amarelo no topo** e o bloco do Telegram (no fim da página) vem **aberto**, marcando quem falta.

- ② Com tudo configurado, a página fica curta: o Telegram vira uma linha "configurado ✓" no rodapé.
- ③ O que aparece ao tocar: compartimento 1 em edição (nome, horários, dica "coloque no compartimento 1 (azul)"), o familiar João aberto, o formulário de um **familiar novo** e a **reposição**, com a escolha do remédio pelas cores.

#### O que tem em cada bloco:

| Bloco                                    | Fechado mostra                                    | Aberto mostra                                            | Passo |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|
| <b>Aviso amarelo</b> (só se faltar algo) | Quem ainda não recebe avisos + "Configurar agora" | —                                                        | 7     |
| <b>Paciente</b>                          | Nome do paciente                                  | Campo para editar o nome                                 | 7     |
| <b>Remédios 1, 2 e 3</b>                 | Número, cor, remédio e horários                   | Nome, horários (até 6), dica de onde colocar, "Esvaziar" | 7, 14 |
| <b>Cuidador(a)</b>                       | Nome                                              | Nome e celular                                           | 7, 8  |
| <b>Familiares</b>                        | Nome de cada um                                   | Nome, celular, "Remover"; "+ Cadastrar familiar" no fim  | 7     |
| <b>Salvar alterações</b>                 | Botão azul grande                                 | —                                                        | 8     |
| <b>Repor remédio</b>                     | Botão laranja                                     | Escolha do remédio (por cor) e confirmação               | 14    |
| <b>Histórico de doses</b>                | % de adesão, contagem e adesão por remédio        | "Ver últimas doses": tabela, planilha, apagar            | 16    |
| <b>Trocar rede Wi-Fi</b>                 | Link (pede confirmação)                           | —                                                        | 4     |
| <b>Avisos pelo Telegram</b>              | "configurado ✓" ou "falta configurar"             | Token, "Buscar IDs", ID de cada pessoa, teste            | 15    |

# Parte B — O código, passo a passo

## Passo 1 — Bibliotecas e pinos

**O que faz:** carrega as bibliotecas e dá nome aos pinos, para o resto do código falar em `BUTTON_PIN` em vez de "5".

```
#include <Arduino.h>
#include <WiFi.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <HTTPClient.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include <WebServer.h>
#include <DNSServer.h>
#include <Preferences.h>
#include <time.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <ESP32Servo.h>

#define BUZZER_PIN 15
#define LED_PIN 4
#define BUTTON_PIN 5
#define NUM_COMPARTIMENTOS 3
#define MAX_HORARIOS 6 // horarios por medicamento
#define MAX_FAMILIARES 5
#define MAX_HISTORICO 60
```

| Biblioteca                                | Para quê                                          |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| WiFi, WebServer, DNSServer                | Conectar à internet e servir a página de cadastro |
| WiFiClientSecure, HTTPClient, ArduinoJson | Falar com o Telegram (HTTPS + JSON)               |
| Preferences                               | Memória permanente                                |
| time.h                                    | Relógio (hora certa pela internet)                |
| Wire, LiquidCrystal_I2C                   | LCD pelo barramento I2C                           |
| ESP32Servo                                | Controlar os servos                               |

Os pinos e ângulos de cada servo ficam em **vetores** (listas), um item por compartimento:

```
const int PINOS_SERVO[NUM_COMPARTIMENTOS] = {13, 14, 27};
// Angulos de cada porta (ajuste aqui se algum mecanismo precisar de outro valor).
const int ANGULO_FECHADO[NUM_COMPARTIMENTOS] = {0, 0, 0};
const int ANGULO_ABERTO[NUM_COMPARTIMENTOS] = {90, 90, 90};
```

💡 `PINOS_SERVO[0]` é o compartimento **1** (em programação, a contagem começa em zero). Esse detalhe aparece no código inteiro: índice `c` = compartimento `c + 1`.

Por fim, os **objetos** que representam cada peça:

```
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
Servo servos[NUM_COMPARTIMENTOS];
WebServer server(80);
DNSServer dnsServer;
Preferences preferences;
Preferences prefsCadastro;
Preferences prefsHistorico;
```

- `lcd(0x27, 16, 2)` : LCD no endereço I2C `0x27`, 16 colunas, 2 linhas.
- `server(80)` : servidor web na porta 80 (a porta padrão dos navegadores).

- Três `Preferences`, uma para cada "gaveta" da memória: Wi-Fi, cadastro e histórico.

## Passo 2 — Estruturas de dados

O que faz: define como o programa guarda um **contato** e um **medicamento**.

```
struct Contato {
    String nome;
    String telefone;
    String chatId;
};

// Medicamento guardado num compartimento fixo (indice 0..2 = compartimento 1..3).
struct Medicamento {
    String nome;
    int totalHorarios = 0;
    int hora[MAX_HORARIOS];
    int minuto[MAX_HORARIOS];
    bool jaDisparado[MAX_HORARIOS];
};

String nomePaciente = "";
Medicamento medicamentos[NUM_COMPARTIMENTOS];
Contato cuidador;
Contato familiares[MAX_FAMILIARES];
```

- `struct` agrupa várias informações sob um nome só — como uma ficha.
- `medicamentos[3]`: a **posição no vetor é o compartimento**. O remédio em `medicamentos[1]` está sempre no compartimento 2. É isso que "prende" cada remédio ao seu compartimento.
- `jaDisparado[]`: impede que o mesmo horário toque duas vezes no mesmo minuto.
- `chatId`: número que o Telegram usa para identificar cada pessoa (Passo 15).

Os **estados** da máquina de estados:

```
enum Estado { AGUARDANDO, TOCANDO, PORTA_ABERTA_ESTADO, ABASTECENDO };
Estado estadoAtual = AGUARDANDO;
```

E as variáveis da **dose atual** (usam máscara de bits, conceito 4):

```
uint8_t doseMascara = 0;
String horarioDose = "";
String nomesDose = "";
unsigned long alarmeIniciadoEm = 0;
int nivelAvisoEnviado = 0; // 0 = nenhum, 1 = cuidador avisado, 2 = todos alertados
bool dosePendente = false; // alarme terminou sem acesso; botao ainda abre os compartimentos
```

Duas funções pequenas ajudam a trabalhar com isso:

```
bool temBit(uint8_t mascara, int i) {
    return (mascara >> i) & 1;
}

bool medicamentoAtivo(int c) {
    return medicamentos[c].nome != "" && medicamentos[c].totalHorarios > 0;
}
```

- `temBit(5, 0)` → verdadeiro (compartimento 1 está na máscara `101`).
- `medicamentoAtivo(c)`: um compartimento só conta se tiver nome e horário.

## Passo 3 — `setup()` : ligando tudo

**O que faz:** roda uma vez ao ligar. Configura pinos, posiciona as portas, liga o LCD, **lê a memória** e tenta conectar no Wi-Fi.

```
pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);
pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);
digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);
digitalWrite(LED_PIN, LOW);

for (int c = 0; c < NUM_COMPARTIMENTOS; c++) {
    servos[c].attach(PINOS_SERVO[c]);
    servos[c].write(ANGULO_FECHADO[c]);
}
```

- `OUTPUT` : o ESP32 **manda** energia no pino (buzzer, LED).
- `INPUT_PULLUP` : o pino fica "puxado" para 3,3 V por um resistor **interno**. Quando o botão é apertado, ele liga o pino ao GND e a leitura vira `LOW`. Por isso o botão não precisa de resistor externo, e "apertado" é `digitalRead(BUTTON_PIN) == LOW`.
- O `for` percorre os 3 servos, liga cada um no seu pino e fecha a porta.

Depois, carrega a memória e decide o modo de Wi-Fi:

```
prefsCadastro.begin("cadastro", false);
carregarCadastro();
prefsHistorico.begin("historico", false);
carregarHistorico();

preferences.begin("wifi", false);
String ssidSalvo = preferences.getString("ssid", "");
String senhaSalva = preferences.getString("pass", "");
```

```
if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
    iniciarModoNormal();
} else {
    iniciarModoConfig();
}
```

- Se existe rede salva e a conexão funciona → **modo normal** (Passo 5).
- Se não → **modo de configuração** (Passo 4).

## Passo 4 — Wi-Fi sem senha no código (captive portal)

**O que faz:** quando a placa não sabe em qual Wi-Fi entrar, ela **cria a sua própria rede** chamada `ZeloPlus-Config`. Ao conectar o celular nela, a página de configuração abre sozinha (igual ao Wi-Fi de aeroporto).

```
void iniciarModoConfig() {
    modoConfig = true;

    WiFi.mode(WIFI_AP_STA);
    WiFi.softAPConfig(apIP, apIP, IPAddress(255, 255, 255, 0));
    WiFi.softAP("ZeloPlus-Config");

    dnsServer.start(DNS_PORT, "*", apIP);
}
```

- `softAP` : transforma o ESP32 em um **ponto de acesso** (roteador).
- `dnsServer.start(..., "*", apIP)` : responde **qualquer** endereço digitado com o IP da placa ( `192.168.4.1` ). É esse "truque" que faz o celular abrir a página sozinho.

Quando o cuidador escolhe a rede e digita a senha, a placa testa e, se der certo, **grava** e reinicia:

```
if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {  
  preferences.putString("ssid", ssid);  
  preferences.putString("pass", senha);
```

```
  delay(3000);  
  ESP.restart();
```

Da próxima vez que ligar, o `setup()` encontra a rede salva e vai direto para o modo normal. O link "Trocar rede Wi-Fi" da página apaga essa rede ( `preferences.remove("ssid")` ) e reinicia no modo de configuração.

## Passo 5 — Modo normal: relógio pela internet e rotas da página

**O que faz:** acerta o relógio pela internet, mostra o IP no LCD e diz ao servidor qual função atende cada endereço da página.

```
const char* ntpServer = "pool.ntp.org";  
const long gmtOffset_sec = -10800; // Brasília (GMT-3)  
const int daylightOffset_sec = 0;
```

```
configTime(gmtOffset_sec, daylightOffset_sec, ntpServer);
```

- **NTP** é um serviço da internet que informa a hora exata. `-10800` segundos = 3 horas a menos que o horário mundial (UTC) = horário de Brasília.

As **rotas** ligam um endereço a uma função:

```
server.on("/", handleRoot);  
server.on("/salvar", HTTP_POST, handleSalvar);  
server.on("/abrir-manual", HTTP_POST, handleAbrirManual);  
server.on("/esvaziar", HTTP_POST, handleEsvaziar);  
server.on("/testar-mensagens", HTTP_POST, handleTestarMensagens);  
server.on("/telegram-ids", HTTP_POST, handleTelegramIds);  
server.on("/historico.csv", handleHistoricoCSV);  
server.on("/limpar-historico", HTTP_POST, handleLimparHistorico);  
server.on("/trocar-wifi", handleTrocarWifi);  
server.begin();
```

| Endereço                           | O que acontece                                  |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| /                                  | Mostra a página de cadastro (Passo 7)           |
| /salvar                            | Recebe o formulário e grava (Passo 8)           |
| /abrir-manual                      | Abre um compartimento para reposição (Passo 14) |
| /esvaziar                          | Esvazia um compartimento (Passo 14)             |
| /testar-mensagens , /telegram-ids  | Telegram (Passo 15)                             |
| /historico.csv , /limpar-historico | Histórico (Passo 16)                            |

## Passo 6 — Memória permanente (Preferences)

**O que faz:** grava e lê o cadastro na memória flash, para ele sobreviver a quedas de energia.

Cada compartimento tem suas chaves: `m0_` (compartimento 1), `m1_`, `m2_`.

```
void salvarMedicamento(int c) {
    const Medicamento& m = medicamentos[c];
    String p = prefixoMedicamento(c);
    uint8_t horas[MAX_HORARIOS];
    uint8_t minutos[MAX_HORARIOS];
    for (int i = 0; i < m.totalHorarios; i++) {
        horas[i] = (uint8_t)m.hora[i];
        minutos[i] = (uint8_t)m.minuto[i];
    }
    prefsCadastro.putString((p + "_nome").c_str(), m.nome);
    prefsCadastro.putUChar((p + "_tot").c_str(), (uint8_t)m.totalHorarios);
    if (m.totalHorarios > 0) {
        prefsCadastro.putBytes((p + "_hr").c_str(), horas, m.totalHorarios);
        prefsCadastro.putBytes((p + "_mn").c_str(), minutos, m.totalHorarios);
    }
}
```

- `putString` grava texto; `putUChar` grava um número pequeno (0-255); `putBytes` grava uma lista de bytes (as horas e os minutos).
- Exemplo do que fica gravado para "Losartana às 08:00 e 20:00" no compartimento 1:  
`m0_nome = "Losartana"`, `m0_tot = 2`, `m0_hr = [8, 20]`, `m0_mn = [0, 0]`.

Na leitura, o programa **confere** se os dados fazem sentido antes de usar:

```
int validos = 0;
for (int i = 0; i < total; i++) {
    if (horas[i] > 23 || minutos[i] > 59) continue;
    horaDestino[validos] = horas[i];
    minutoDestino[validos] = minutos[i];
    disparadoDestino[validos] = false;
    validos++;
}
return validos;
```

**Migração:** a versão anterior (um compartimento só) gravava o remédio em chaves diferentes. Na primeira vez que a versão nova liga, ela copia esse remédio para o compartimento 1 e apaga as chaves antigas:

```
void migrarCadastroAntigo() {
    if (prefsCadastro.isKey("m0_nome") || !prefsCadastro.isKey("remedio")) return;

    Medicamento& m = medicamentos[0];
    m.nome = prefsCadastro.getString("remedio", "");
    m.nome.trim();
    m.totalHorarios = lerHorarios("total", "horas", "minutos", m.hora, m.minuto, m.jaDisparado);
    salvarMedicamento(0);
}
```

- `trim()` tira espaços do começo e do fim do nome. Versões antigas podiam gravar "Losartana " (com espaço), e sem essa limpeza o sistema achava que o remédio tinha mudado e abria o compartimento sem necessidade.

## Passo 7 — A página de cadastro

**O que faz:** quando o navegador abre o IP da placa, a função `handleRoot()` **monta o HTML** (o texto da página) e envia. O visual foi pensado para quem tem pouca familiaridade com tecnologia: **letras e botões grandes, uma cor por compartimento e blocos recolhidos** — só o essencial aparece; um toque abre os detalhes.

**1) Uma cor por compartimento.** Três listas guardam a cor de cada um (use etiquetas das mesmas cores na caixa do dispenser):

```
const char* COR_COMPARTIMENTO[NUM_COMPARTIMENTOS] = {"#2563eb", "#16a34a", "#9333ea"};
const char* FUNDO_COMPARTIMENTO[NUM_COMPARTIMENTOS] = {"#eff6ff", "#f0fdf4", "#faf5ff"};
const char* NOME_COR[NUM_COMPARTIMENTOS] = {"azul", "verde", "roxo"};
```

**2) Blocos recolhidos.** O HTML tem um elemento pronto para isso: `<details>` mostra só o `<summary>` (a "faixa") e esconde o resto até alguém tocar. Cada compartimento é um `<details>` com a sua cor; na faixa aparecem número, remédio e horários:

```
String html = "<details class='comp' style='--cor:" + String(COR_COMPARTIMENTO[c]) + ";--fundo:" +
String(FUNDO_COMPARTIMENTO[c]) + "'" + (aberto ? " open" : "") + "><summary>";
html += marcaCompartimento(c, 44);
if (medicamentoAtivo(c)) {
    html += "<span><b>" + escaparHTML(m.nome) + "</b><small>Compartimento " + n + " (" +
NOME_COR[c] + ") &middot; " +
    horariosTexto(m) + "</small></span>";
} else {
    html += "<span><b>Compartimento " + n + "</b><small>" + NOME_COR[c] + " &middot; vazio
&middot; toque para cadastrar</small></span>";
}
```

- `--cor` e `--fundo` são **variáveis de CSS**: o mesmo estilo ( `.comp` ) pinta a borda e o fundo de cada cartão com a cor do seu compartimento.
- `marcaCompartimento()` desenha a bolinha colorida com o número (ela também aparece na reposição e no histórico).
- O compartimento 1 só vem aberto no primeiro uso (nenhum remédio cadastrado).

Dentro do cartão, a **dica de onde colocar o remédio** repete número e cor:

```
html += "&#128230; Coloque <b>" + escaparHTML(m.nome) + "</b> no <b>compartimento " + n + " (" +
+ NOME_COR[c] + ")</b></div>";
```

Resultado:  Coloque **Losartana** no **compartimento 1 (azul)**. A dica muda **enquanto o cuidador digita**, com um pequeno código JavaScript que roda no navegador:

```
html += "function atualizarDica(c) {";
html += "    var nome = document.getElementById('m' + c + '_nome').value.trim();";
html += "    var dica = document.getElementById('dica-' + c);";
html += "    dica.style.display = nome ? 'block' : 'none';";
```

**3) Pessoas recolhidas.** Cuidador e familiares aparecem **só pelo nome**; tocando, abrem nome e celular. O familiar novo fica atrás do botão "+ Cadastrar familiar":

```
html += "<summary><span style='font-size:28px'>" + String(icone) + "</span><span><b>";
html += contato.nome != "" ? escaparHTML(contato.nome) : String(familiar ? "Novo familiar" :
"Cuidador(a)");
```

Cada familiar ocupa uma "vaga" ( `fam0` a `fam4` ). Ao cadastrar, o navegador procura a primeira vaga livre; ao remover, apaga o ID do Telegram daquela vaga — assim um familiar novo nunca herda o ID de quem saiu:

```
html += "    if (usados.indexOf('fam' + i) >= 0) continue;";
html += "    var modelo = document.getElementById('modelo-
familiar').innerHTML.split('famX').join('fam' + i);";
```

**4) Telegram só quando precisa.** O bloco do Telegram fica no **fim da página**, depois de "Trocar rede Wi-Fi". Ele só aparece **aberto** (e com um aviso no topo) enquanto faltar o token ou

o ID de alguém — por exemplo, logo depois de cadastrar um familiar novo. Configurado, vira uma linha discreta "configurado ✓":

```
bool telegramPendente(String* faltando) {
    bool pendente = (tokenTelegram == "");
    if (cuidador.nome != "" && cuidador.chatId == "") {
        pendente = true;
    }
}
```

Os campos desse bloco ficam **fora** do formulário principal, mas são enviados junto graças ao atributo `form='cadastro'`:

```
html += "</label><input type='text' inputmode='numeric' form='cadastro' name='" + prefixo +
        "_chat' id='chat-" + prefixo +
```

**5) Troca de remédio num compartimento já usado** — antes de enviar, o navegador compara o nome antigo (guardado em `data-original`) com o novo e pede confirmação:

```
html += "    if (antigo && novo && antigo.toLowerCase() != novo.toLowerCase()) {";
html += "        if (!confirm('O compartimento ' + (c + 1) + ' (' + CORES[c] + ') tinha ' +
antigo + '. Retire todos os comprimidos antigos antes de colocar ' + novo + '. Confirmar
troca?')) return false;";
```

 **Segurança:** todo texto digitado passa por `escaparHTML()` antes de entrar na página. Assim, um nome como `D'Ávila` ou `<b>` não quebra o HTML.

```
cpp case '<': saida += "&lt;"; break;
```

## Passo 8 — Salvando o cadastro

**O que faz:** `handleSalvar()` recebe o formulário, **valida** tudo e só então grava.

### 1. Cuidador é obrigatório:

```
if (novoCuidador.nome == "" || novoCuidador.telefone == "") {
    server.send(400, "text/plain; charset=utf-8", "O cuidador é obrigatório: preencha nome e
celular.");
    return;
}
```

### 1. Cada remédio precisa de horário, e ao menos um remédio precisa existir:

```
if (novos[c].nome != "" && novos[c].totalHorarios == 0) {
```

```
    if (ativos == 0) {
        server.send(400, "text/plain; charset=utf-8", "Cadastre ao menos um medicamento. Volte e
corrija.");
        return;
    }
}
```

### 1. Descubra quais compartimentos receberam remédio novo e os coloca numa fila de abastecimento (máscara de bits):

```
if (novo != "" && novo != antigo) filaAbastecimento |= (uint8_t)(1 << c);
if (novo == "") filaAbastecimento &= (uint8_t)~(1 << c);
medicamentos[c] = novos[c];
```

- `|= (1 << c)` **liga** o bit do compartimento `c` ("este precisa abrir").
- `&= ~(1 << c)` **desliga** o bit.
- Se só os horários mudaram, `novo == antigo` e nada entra na fila → a porta não abre.
- **Grava tudo** e devolve o navegador para a página:

```
salvarCadastro();

server.sendHeader("Location", "/");
server.send(303);
```

A abertura das portas **não** acontece aqui: quem cuida disso é o `loop()` (Passo 10), um compartimento de cada vez.

## Passo 9 — Movendo as portas (servos)

**O que faz:** abre e fecha as portas **devagar** (1 grau a cada 15 ms), para não dar tranco no mecanismo.

```
void abrirCompartimento(int c) {
    for (int angulo = ANGULO_FECHADO[c]; angulo <= ANGULO_ABERTO[c]; angulo++) {
        servos[c].write(angulo);
        delay(15);
    }
}
```

- 90 passos × 15 ms ≈ **1,4 s** para abrir.

Para abrir **vários** compartimentos com um único toque, sem que dois servos se movam juntos (o que sobrecarregaria a fonte), eles abrem **um depois do outro**:

```
// Abre os compartimentos marcados, um logo apos o outro.
void abrirCompartimentos(uint8_t mascara) {
    for (int c = 0; c < NUM_COMPARTIMENTOS; c++) {
        if (temBit(mascara, c)) abrirCompartimento(c);
    }
}
```

Como `abrirCompartimento()` só termina depois que a porta chegou em 90°, o próximo servo só começa quando o anterior parou.

## Passo 10 — O coração: `loop()` e a máquina de estados

**O que faz:** a cada volta, atende a página web, confere os horários e executa o que o **estado atual** manda.


```
void loop() {
    if (modoConfig) {
        dnsServer.processNextRequest();
    }
    server.handleClient();

    if (modoConfig) {
        return;
    }

    verificarHorarios();

    switch (estadoAtual) {
```

## Mapa dos estados:

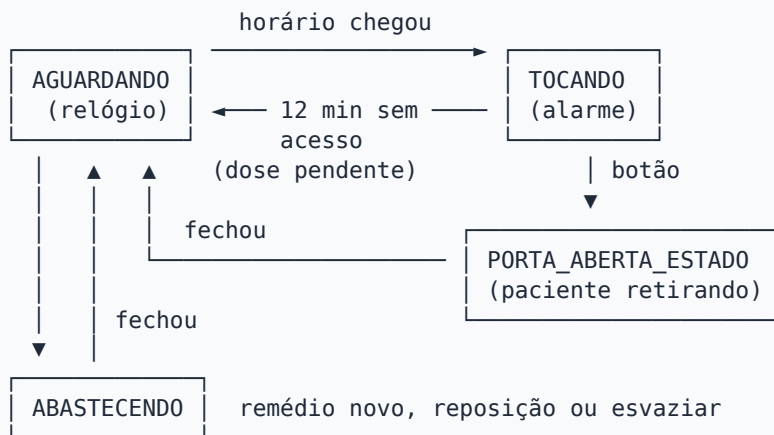

No estado **AGUARDANDO**, a ordem de prioridade é:

```
case AGUARDANDO:
    if (dosePendente && digitalRead(BUTTON_PIN) == LOW) {
        abrirParaPaciente();
        break;
    }
    // Prioridade: alarme em espera; depois abastecimento de compartimento novo.
    if (mascaraEmEspera != 0) {
        uint8_t mascara = mascaraEmEspera;
        mascaraEmEspera = 0;
        iniciarAlarme(mascara, horarioEmEspera);
        break;
    }
    if (filaAbastecimento != 0) {
```

1. Dose pendente + botão → abre para o paciente.
2. Algum horário esperando → começa o alarme.
3. Algum compartimento novo na fila → abre para abastecer.
4. Nada disso → mostra o relógio.

## Passo 11 — Conferindo os horários

**O que faz:** uma vez por segundo, compara a hora atual com os horários de cada remédio.  
Funciona **em qualquer estado**.

```
for (int c = 0; c < NUM_COMPARTIMENTOS; c++) {
    if (!medicamentoAtivo(c)) continue;
    Medicamento& m = medicamentos[c];
    for (int i = 0; i < m.totalHorarios; i++) {
        if (m.jaDisparado[i] || timeinfo.tm_hour != m.hora[i] || timeinfo.tm_min != m.minuto[i])
            continue;
        m.jaDisparado[i] = true;
        if (mascaraEmEspera == 0) horarioEmEspera = formatarHorario(m.hora[i], m.minuto[i]);
        mascaraEmEspera |= (uint8_t)(1 << c);
    }
}
```

- Quando bate o horário, o compartimento entra na **máscara de espera**.
- **Dois remédios no mesmo horário** entram na mesma máscara → viram **um único alarme**.
- Se o dispenser estiver ocupado (ex.: cuidador repondo outro compartimento), o horário **fica esperando** e toca assim que ele voltar a **AGUARDANDO**.

- `jaDisparado` impede de tocar de novo no mesmo minuto; ele é "rearmado" quando o minuto muda:

```
if (timeinfo.tm_min != medicamentos[c].minuto[i]) medicamentos[c].jaDisparado[i] = false;
```

## Passo 12 — O alarme tocando

**O que faz:** `iniciarAlarme()` prepara a dose e muda para `TOCANDO`.

```
void iniciarAlarme(uint8_t mascara, const String& horario) {
    estadoAtual = TOCANDO;
    doseMascara = mascara;
    horarioDose = horario;
    nomesDose = juntarNomes(mascara);
    alarmeIniciadoEm = millis();
    nivelAvisoEnviado = 0;
    dosePendente = false;
```

- `nomesDose` guarda o texto "Losartana e Metformina" para as mensagens.
- `alarmeIniciadoEm` marca o instante do início: todos os tempos são contados a partir dele.

**Ciclo do som** — 1 minuto tocando, 1 minuto em silêncio:

```
bool minutoDeSom = ((decorrido / CICLO_ALARME) % 2) == 0;
if (!minutoDeSom) {
    if (ledBuzzerLigado) desligarLedBuzzer();
    break;
}

if (millis() - ultimoToggleAlarme >= 150) {
    ultimoToggleAlarme = millis();
    ledBuzzerLigado = !ledBuzzerLigado;
    digitalWrite(LED_PIN, ledBuzzerLigado ? HIGH : LOW);
    digitalWrite(BUZZER_PIN, ledBuzzerLigado ? HIGH : LOW);
}
```

- `decorrido / CICLO_ALARME` = quantos minutos se passaram (0, 1, 2, ...).
- `% 2 == 0` → minutos pares (0, 2, 4...) tocam; ímpares ficam em silêncio.
- Dentro do minuto de som, LED e buzzer **invertem a cada 150 ms** (bip-bip-bip).

**Avisos** — aos 6 minutos para o cuidador, aos 12 para todos:

```
if (decorrido >= TEMPO_PRIMEIRO_AVISO && nivelAvisoEnviado == 0) {
    desligarLedBuzzer();
    escreverLinhaLCD(1, "Avisando cuidad.");
    avisarPrimeiroAtraso();
    nivelAvisoEnviado = 1;
}
```

```
if (decorrido >= TEMPO_ALERTA_FINAL) {
    desligarLedBuzzer();
    lcd.clear();
    escreverLinhaLCD(0, "Avisando familia");
    atualizarDose(DOSE_SEM_ACESSO, decorrido);
    alertarSemAcesso();
    nivelAvisoEnviado = 2;
```

```
dosePendente = true;
lcd.clear();
estadoAtual = AGUARDANDO;
```

- `nivelAvisoEnviado` evita mandar o mesmo aviso duas vezes.
- Depois dos 12 minutos o alarme **para**, mas a dose fica **pendente**: se o paciente aparecer mais tarde, o botão ainda abre os compartimentos.

## Passo 13 — O paciente aperta o botão

**O que faz:** registra o acesso, desliga o alarme e **abre todos os compartimentos da dose**, um após o outro.

```
void abrirParaPaciente() {
    unsigned long decorrido = millis() - alarmeIniciadoEm;
    atualizarDose(decorrido < TEMPO_PRIMEIRO_AVISO ? DOSE_NO_HORARIO : DOSE_ATRASADA, decorrido);
    esquecerRegistrosDose();

    desligarLedBuzzer();
    dosePendente = false;

    lcd.clear();
    escreverLinhaLCD(0, "Retire: " + listaCompartimentos(doseMascara));
    escreverLinhaLCD(1, "Abrindo...");
    abrirCompartimentos(doseMascara);

    mascaraAberta = doseMascara;
    estadoAtual = PORTA_ABERTA_ESTADO;
    portaAbertaEm = millis();

    avisarAcessoAposAviso();
}
```

- Antes do 1º aviso → "tomada no horário"; depois → "tomada com atraso" (Passo 16).
- Se já tinha avisado alguém, `avisarAcessoAposAviso()` manda "Paulo acessou o dispenser às 15:27", para a família ficar tranquila.

**Fechando — trava de 7 segundos:** logo depois de abrir, o dedo do paciente ainda pode estar no botão. Para não fechar sem querer, o botão só vale depois de 7 s. Se ninguém apertar, fecha sozinho após 3 minutos:

```
bool travaLiberada = (millis() - portaAbertaEm >= TRAVA_BOTAO);
bool fechar = (travaLiberada && digitalRead(BUTTON_PIN) == LOW) ||
               (millis() - portaAbertaEm >= TEMPO_PORTA_ABERTA);

if (fechar) {
    lcd.clear();
    escreverLinhaLCD(0, "Fechando porta..");
    fecharCompartimentos(mascaraAberta);
    mascaraAberta = 0;
}
```

## Passo 14 — Abastecer, repor e esvaziar

Os três casos usam a **mesma função**, que abre **um** compartimento para o cuidador e só muda o texto do LCD:

```
void iniciarAbastecimento(int c, ModoAbastecimento modo) {
    compartimentoAbastecendo = c;
    modoAbastecimento = modo;

    String titulo;
    if (modo == ABAST_REPOR) titulo = "Repor compart." + String(c + 1);
    else if (modo == ABAST_ESVAZIAR) titulo = "Esvaziar comp." + String(c + 1);
    else titulo = "Abast. compart." + String(c + 1);
}
```

**a) Abastecimento guiado (remédio novo):** o `loop()` pega o **primeiro** compartimento da fila, tira ele da fila e abre. Quando a porta fecha, o estado volta para `AGUARDANDO` e o próximo da fila abre — um de cada vez:

```
for (int c = 0; c < NUM_COMPARTIMENTOS; c++) {
    if (!temBit(filaAbastecimento, c)) continue;
    filaAbastecimento &= (uint8_t)~(1 << c);
    iniciarAbastecimento(c, ABAST_NOVO);
    break;
}
```

**b) Reposição:** na página, o cuidador **escolhe o remédio** (os botões de opção só mostram os cadastrados), confirma, e o navegador envia o número do compartimento:

```
html += "    var corpo = new URLSearchParams(); corpo.append('c', reporEscolhido);";
html += "    fetch('/abrir-manual', {method:'POST', body: corpo}).then(function(r){";
```

A placa confere se o pedido é válido e se está livre, e abre **só aquele**:

```
void handleAbrirManual() {
    int c = server.arg("c").toInt();
    if (!server.hasArg("c") || c < 0 || c >= NUM_COMPARTIMENTOS || !medicamentoAtivo(c)) {
        server.send(400, "text/plain", "Compartimento invalido");
        return;
    }
    if (!dispenserLivre()) {
        server.send(409, "text/plain", "Sistema ocupado no momento");
        return;
    }

    server.send(200, "text/plain", "OK");
    iniciarAbastecimento(c, ABAST_REPOR);
}
```

**c) Esvaziar:** apaga o remédio do compartimento e, se o cuidador pediu, abre para retirar as sobras:

```
medicamentos[c].nome = "";
medicamentos[c].totalHorarios = 0;
filaAbastecimento &= (uint8_t)~(1 << c);
salvarMedicamento(c);
```

## Passo 15 — Avisos pelo Telegram

**Por que Telegram?** É gratuito, oficial e funciona com uma simples requisição pela internet. (O WhatsApp gratuito via CallMeBot ficou sem vagas; o WhatsApp oficial é pago e exige aprovação da Meta.)

**Configuração (uma vez):** o cuidador cria um bot no **@BotFather**, cola o **token** na página; cada pessoa abre o bot e toca em **Iniciar**; o botão "Buscar IDs" mostra o `chatId` de cada uma.

**Enviar uma mensagem** é fazer um pedido HTTPS para a API do Telegram:

```
String url = "https://api.telegram.org/bot" + token + "/" + metodo;
if (!http.begin(cliente, url)) {
    Serial.println("Telegram: falha ao iniciar conexao");
    return -1;
}
http.addHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
int codigo = http.POST(corpo);
```

```
String corpo = "chat_id=" + codificarURL(contato.chatId) + "&text=" + codificarURL(texto);
int codigo = chamarTelegram(tokenTelegram, "sendMessage", corpo);
```

- `codificarURL()` troca espaços e acentos por códigos ( `%20` , `%C3%A3` ...), porque o endereço/corpo do pedido só aceita alguns caracteres.
- A resposta `200` significa "entregue ao Telegram".

### As mensagens:

```
void avisarPrimeiroAtraso() {
    enviarParaCuidador("Zelo+: Paciente " + nomePaciente + " não acessou o medicamento das " +
        horarioDose + " horas (" + nomesDose + ").");
}

void alertarSemAcesso() {
    enviarParaTodos("Zelo+: Paciente " + nomePaciente + " não foi até o dispenser no horário das
        " +
        horarioDose + " (" + nomesDose + ").");
}
```

| Momento                   | Quem recebe           | Exemplo                                                                                          |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 min sem acesso          | Cuidador              | Zelo+: Paciente "Paulo" não acessou o medicamento das "15:26" horas (Losartana).                 |
| 12 min sem acesso         | Cuidador + familiares | Zelo+: Paciente "Paulo" não foi até o dispenser no horário das "15:26" (Losartana e Metformina). |
| Acesso depois de um aviso | Quem foi avisado      | Zelo+: Paulo acessou o dispenser às 15:27 (dose de Losartana das 15:26).                         |

**Buscar IDs:** a função `handleTelegramIds()` pede ao Telegram as últimas mensagens recebidas pelo bot ( `getUpdates` ) e usa a **ArduinoJson** para ler só o que interessa (id e nome de cada pessoa):

```
JsonDocument filtro;
JsonObject chatFiltro = filtro["result"][0]["message"]["chat"].to<JsonObject>();
chatFiltro["id"] = true;
chatFiltro["first_name"] = true;
chatFiltro["last_name"] = true;
chatFiltro["username"] = true;
```

O **filtro** economiza memória: a resposta do Telegram tem muitos campos, mas a placa guarda apenas esses quatro.

## Passo 16 — Histórico de doses

**O que faz:** cada remédio de cada alarme vira um **registro** com data, situação e atraso. Serve para calcular a **adesão ao tratamento**.

```
struct RegistroDose {
    uint32_t inicio;           // horario do disparo (segundos desde 1970)
    uint16_t atrasoSeg;        // tempo ate o acesso
    uint8_t status;
    uint8_t compartimento;     // 0..2
    char remedio[20];          // nome do medicamento no momento da dose
};
```

```
enum StatusDose : uint8_t {
    DOSE_PENDENTE = 0,        // alarme tocando (ou placa reiniciou antes de concluir)
    DOSE_NO_HORARIO = 1,      // acesso antes do primeiro aviso ao cuidador
    DOSE_ATRASADA = 2,        // acesso depois do primeiro aviso (inclusive apos o alerta final)
    DOSE_SEM_ACESSO = 3       // alerta final enviado e ninguém acessou
};
```

**Buffer circular:** a placa guarda as **60 doses mais recentes**. Quando enche, a próxima sobrescreve a mais antiga — como uma fila que dá a volta:

```
int registrarInicioDose(int compartimento) {
    int idx = proximoHistorico;

    proximoHistorico = (proximoHistorico + 1) % MAX_HISTORICO;
    if (totalHistorico < MAX_HISTORICO) totalHistorico++;
    return idx;
}
```

- `% MAX_HISTORICO` (resto da divisão) faz a posição voltar a 0 depois da 59.

Para ler do mais recente para o mais antigo:

```
int indiceHistorico(int k) {
    return (proximoHistorico - 1 - k + 2 * MAX_HISTORICO) % MAX_HISTORICO;
}
```

**Adesão** = doses tomadas (no horário + com atraso) ÷ doses concluídas, nos últimos 7 dias. O arredondamento é feito somando metade do divisor:

```
int percentual(int parte, int total) {
    return (parte * 100 + total / 2) / total;
}
```

A página mostra a adesão geral e por remédio, a tabela das 20 doses mais recentes e o link **Baixar histórico (CSV)**, que abre no Excel/Google Planilhas:

```
String csv = "data;horario;medicamento;compartimento;situacao;atraso_minutos\r\n";
```

## Passo 17 — Escrevendo no LCD

**O problema:** o LCD 16x2 não tem acentos. "Potássica" apareceria com símbolos estranhos. **A solução:** converter para maiúsculas sem acento.

Em UTF-8 (o formato do texto), letras acentuadas usam **2 bytes**, e o primeiro é sempre `0xC3`. O segundo byte diz qual é a letra:

```
if (c == 0xC3 && i + 1 < texto.length()) {
    uint8_t d = (uint8_t)texto[++i] | 0x20; // 0x80-0x9F (maiusculas) -> minusculas
    char base = '?';
    if (d >= 0xA0 && d <= 0xA5) base = 'A';
    else if (d == 0xA7) base = 'C';
    else if (d >= 0xA8 && d <= 0xAB) base = 'E';
}
```

Resultado: "Losartana Potássica" → "LOSARTANA POTASS" (cortado em 16 colunas).

E uma função que **sempre preenche a linha inteira**, apagando restos de textos anteriores:

```
void escreverLinhaLCD(int linha, const String& texto) {
    String t = textoLCD(texto);
    while (t.length() < 16) t += ' ';
    lcd.setCursor(0, linha);
    lcd.print(t);
}
```

| Situação          | Linha 1                            | Linha 2                             |
|-------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Aguardando        | 15:26:03                           | 3 remédios                          |
| Alarme            | Hora do remédio!                   | LOSARTANA (C1) (alterna a cada 2 s) |
| Retirada          | Retire: C1 C2                      | Fecha em: 170s                      |
| Abastecer / Repor | Abast. compart.2 / Repor compart.2 | METFORMINA                          |
| Dose pendente     | 15:40:10                           | Dose pendente!                      |

## Passo 18 — Modo de teste

Esperar 12 minutos a cada teste seria lento. Uma única linha troca todos os tempos:

```
#define MODO_TESTE 1

#if MODO_TESTE
const unsigned long CICLO_ALARME = 5UL * 1000UL;
const unsigned long TEMPO_PRIMEIRO_AVISO = 30UL * 1000UL;
const unsigned long TEMPO_ALERTA_FINAL = 60UL * 1000UL;
#else
const unsigned long CICLO_ALARME = 60UL * 1000UL;
const unsigned long TEMPO_PRIMEIRO_AVISO = 6UL * 60UL * 1000UL;
const unsigned long TEMPO_ALERTA_FINAL = 12UL * 60UL * 1000UL;
#endif
```

- `#if` é resolvido **na compilação**: só um dos blocos vai para a placa.
- Com `MODO_TESTE 1`: aviso aos 30 s, alerta aos 60 s, som 5 s / silêncio 5 s.
- **Antes do uso real**, trocar para `#define MODO_TESTE 0` e gravar de novo.
- O `UL` ("unsigned long") evita que a conta estoure: `12 * 60 * 1000` passa do limite de um `int` em algumas placas.

## Parte C — Juntando tudo

### C1. Linha do tempo de uma dose

Exemplo: **Losartana (compartimento 1)** e **Metformina (compartimento 2)** às **15:26**, modo real.

| Hora        | O que acontece                                                                                                               | Onde no código    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 15:26:00    | <code>verificarHorarios()</code> coloca C1 e C2 na máscara de espera                                                         | Passo 11          |
| 15:26:00    | <code>loop()</code> em <code>AGUARDANDO</code> chama <code>iniciarAlarme(0b011, "15:26")</code> ; cria 2 registros "tocando" | Passos 10, 12, 16 |
| 15:26–15:27 | Buzzer e LED bip-bip; LCD alterna <code>LOSARTANA (C1)</code> / <code>METFORMINA (C2)</code>                                 | Passos 12, 17     |
| 15:27–15:28 | Silêncio (botão continua valendo)                                                                                            | Passo 12          |
| 15:32       | Sem acesso → Telegram para o cuidador                                                                                        | Passos 12, 15     |
| 15:33       | Paciente aperta o botão → registros "com atraso (7 min)"; abre C1, depois C2                                                 | Passo 13          |
| 15:33       | Telegram "Paulo acessou o dispenser às 15:33" para o cuidador                                                                | Passo 15          |
| 15:33:07    | Trava liberada; LCD <code>Fecha em: 173s</code>                                                                              | Passo 13          |
| 15:34       | Paciente aperta → fecha C1, depois C2 → <code>AGUARDANDO</code>                                                              | Passo 13          |

Se o paciente **não** aparecer até 15:38 (12 min): alerta para todos, registros "sem acesso", LCD `Dose pendente!` , e o botão ainda abre os dois compartimentos depois.

### C2. Referência rápida

#### Tempos

| Constante                                                          | Modo real | Modo teste |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| <code>CICLO_ALARME</code>                                          | 1 min     | 5 s        |
| <code>TEMPO_PRIMEIRO_AVISO</code>                                  | 6 min     | 30 s       |
| <code>TEMPO_ALERTA_FINAL</code>                                    | 12 min    | 60 s       |
| <code>TRAVA_BOTAO</code>                                           | 7 s       | 7 s        |
| <code>TEMPO_PORTA_ABERTA</code> / <code>TEMPO_ABASTECIMENTO</code> | 3 min     | 3 min      |

#### Memória (Preferences)

| Gaveta (namespace)     | Chaves                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>wifi</code>      | <code>ssid</code> , <code>pass</code>                                                                                                                                                         |
| <code>cadastro</code>  | <code>nome</code> (paciente), <code>m0_*</code> / <code>m1_*</code> / <code>m2_*</code> (remédios), <code>cuid_*</code> , <code>fam0_*</code> ... <code>fam4_*</code> , <code>tg_token</code> |
| <code>historico</code> | <code>regs2</code> (registros), <code>total</code> , <code>prox</code>                                                                                                                        |

## Limites

| O quê                   | Máximo |
|-------------------------|--------|
| Compartimentos/remédios | 3      |
| Horários por remédio    | 6      |
| Familiares              | 5      |
| Doses no histórico      | 60     |

## C3. Para praticar

Sugestões de exercícios, do mais simples ao mais desafiador:

1. **Mudar o tempo da trava** de 7 s para 5 s (Passo 13: `TRAVA_BOTAO` ).
  2. **Trocar o bip**: fazer o buzzer inverter a cada 300 ms em vez de 150 ms (Passo 12).
  3. **Mensagem no LCD**: mostrar `Bom dia!` na linha 2 entre 6h e 12h quando não houver dose pendente (Passo 17, `atualizarLCDRelogio()` ).
  4. **Ângulo diferente**: o compartimento 3 abre só até 70° (Passo 1: `ANGULO_ABERTO` ).
  5. **Quarto compartimento**: o que precisaria mudar? (Dica: `NUM_COMPARTIMENTOS` , `PINOS_SERVO` , os ângulos... e a página já se adapta sozinha.)
  6. **Desafio**: enviar pelo Telegram um resumo diário de adesão às 21h (Passos 11, 15 e 16).
-

# Parte D — Uso autônomo, sem o laptop (condicional)

⚠ **Esta parte é condicional.** Ela descreve como deixar o dispenser funcionando sozinho, ligado na tomada ou em bateria. **Só deve ser aplicada depois que os testes forem concluídos e a versão final for gravada** (ver D1). Até lá, continua valendo a **montagem de bancada** da seção [A2](#): ESP32 no USB do laptop e servos na fonte de 5 V separada.

## D1. Condição para aplicar

Marque tudo antes de passar para a montagem autônoma:

- ☐ **Testes da bancada aprovados:** histórico (no horário, com atraso, sem acesso e planilha), alerta de 60 s no Telegram para cuidador e familiares, abastecimento guiado, reposição por remédio, dois remédios no mesmo horário, migração do cadastro e o novo visual da página no celular.
- ☐ **Tempos reais ligados:** no `src/main.cpp`, trocar `#define MOD0_TESTE 1` por `#define MOD0_TESTE 0` (Passo 18), fazer **Build** e **Upload** e conferir no Serial Monitor que a linha `ATENCAO: MOD0_TESTE ativo` **não** aparece mais.
- ☐ **Um dia inteiro de uso assistido**, ainda no laptop, com os horários reais do paciente, sem falhas.
- ☐ **IP fixo:** no roteador, reservar o IP do dispenser ("reserva de DHCP"), para o endereço da página não mudar quando o roteador reiniciar.
- ☐ **Etiquetas coloridas** nas portas: 1 azul, 2 verde, 3 roxo (as mesmas cores da página).

## D2. Por que o laptop não é necessário

O programa fica **gravado na memória flash** do ESP32 e roda sozinho sempre que a placa recebe energia. Durante os testes, o laptop faz só duas coisas:

1. **Fornece energia** pela porta USB.
2. **Mostra as mensagens** da placa no Serial Monitor (útil para testar, dispensável no uso).

Para funcionar sem o laptop, basta trocar a **fonte de energia**. O código não muda.

## D3. Opção A — carregador USB

A troca mais simples: no lugar do laptop, um **carregador de celular** no mesmo cabo USB do ESP32.

- Carregador de **5 V e pelo menos 1 A**.
- Cabo USB de boa qualidade (cabos muito finos derrubam a tensão).
- Os servos **continuam** na fonte de 5 V separada, com o **GND ligado ao GND do ESP32**, como na bancada.


Serve bem para a fase de transição e para demonstrações.

## D4. Opção B — fonte única (montagem definitiva)

Uma única fonte de **5 V, de 2 A a 3 A**, alimenta o ESP32 (pelo pino **VIN**) e os três servos. Um **capacitor** perto dos servos absorve o pico de corrente quando eles começam a girar.

## Zelo+ — Montagem autônoma: fonte única + relógio DS3231

Para uso após os testes e a gravação da versão final · a montagem de bancada (USB no laptop) continua válida para testes

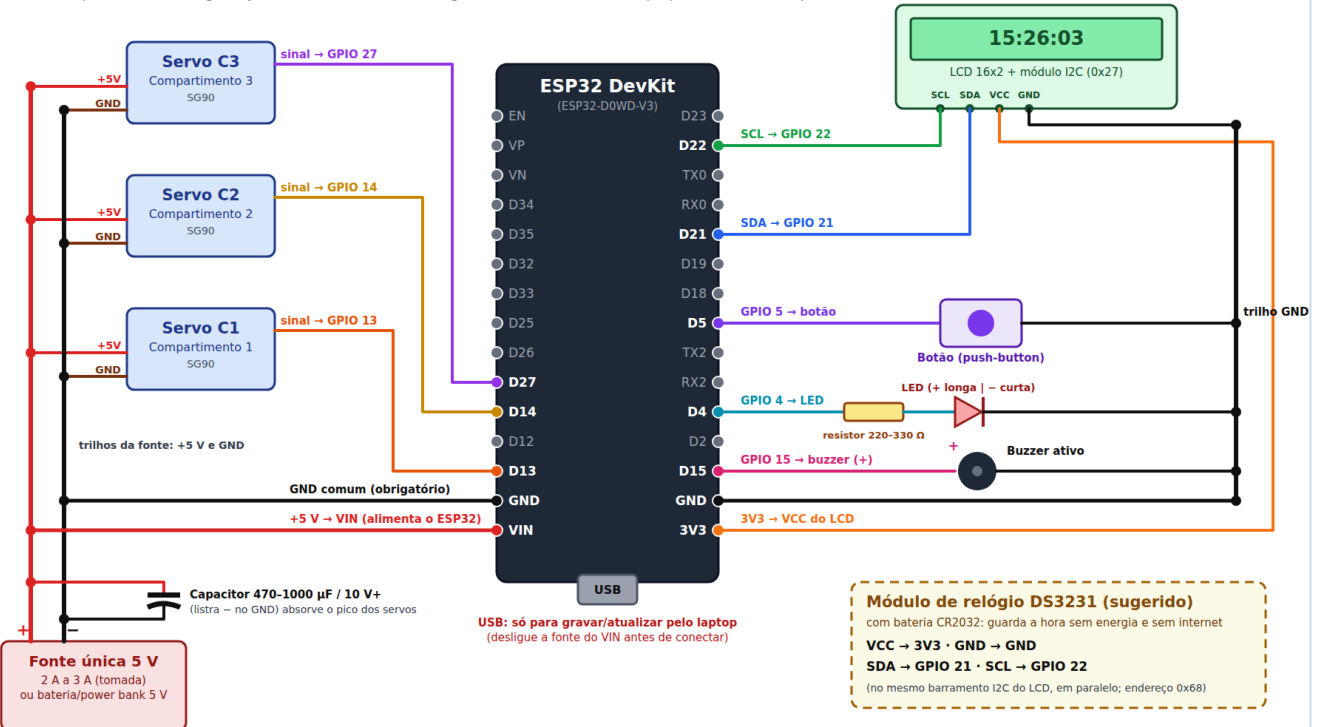

### Resumo das ligações

Fonte única 5 V (+)  
Capacitor 470-1000 µF  
DS3231 (sugerido)  
Servos C1 / C2 / C3 — sinal  
LCD I2C — SDA / SCL  
Botão  
LED  
Buzzer ativo (+)  
Fonte 5 V (-)

VIN + vermelho dos servos  
entre +5 V e GND  
3V3, GND, GPIO 21, GPIO 22  
GPIO 13 / 14 / 27  
GPIO 21 / GPIO 22  
GPIO 5  
GPIO 4 via resistor 220-330 Ω  
GPIO 15  
GND do ESP32 e dos servos

USB desligado durante o uso  
perto dos servos; respeitar a polaridade  
junto com o LCD (I2C)  
+5V e GND na fonte única  
VCC → 3V3, GND → GND  
outra perna → GND (sem resistor: INPUT\_PULLUP)  
perna curta → GND  
(-) → GND  
GND comum é obrigatório

### Legenda

— +5 V (fonte única)  
— GND (terra)  
— 3,3 V do ESP32  
— SDA (dados I2C)  
— SCL (clock I2C)  
● = ligação (emenda)  
Fios que se cruzam SEM ● não estão ligados.  
Caixa tracejada = sugestão para uma próxima versão.  
Confira os nomes na serigrafia da sua placa:  
a ordem dos pinos varia entre modelos.

(versão vetorial: <docs/ligacoes-autonomo.svg>)

### Ligações que mudam em relação à bancada:

| Ligação            | Bancada (testes)   | Autônoma (uso)                                                        |
|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Energia do ESP32   | USB do laptop      | <b>+5 V da fonte → pino VIN</b>                                       |
| Energia dos servos | Fonte 5 V separada | <b>A mesma fonte de 5 V</b>                                           |
| GND                | Fonte ↔ ESP32      | Fonte ↔ ESP32 ↔ servos ( <b>comum</b> )                               |
| Capacitor          | —                  | <b>470-1000 µF, 10 V ou mais</b> , entre +5 V e GND, perto dos servos |
| USB                | Sempre ligado      | <b>Só para gravar/atualizar</b>                                       |

### Cuidados:

- Use fonte de **5 V exatos**. O VIN aceita um pouco mais, mas o regulador da placa esquenta à toa.
- O capacitor eletrolítico tem polaridade: a perna marcada com a **faixa "—" vai no GND**. Invertido, ele pode estufar.
- Nunca ligue o USB e a fonte no VIN ao mesmo tempo**. Para atualizar o programa, desligue a fonte, ligue o USB no laptop, grave e depois volte para a fonte.

**Consumo aproximado** (para escolher a fonte):

| Parte                               | Corrente típica       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| ESP32 com Wi-Fi ligado              | 0,10 a 0,25 A         |
| LCD (com luz de fundo) + LED        | cerca de 0,05 A       |
| Servo parado                        | poucos mA cada        |
| Servo em movimento (um de cada vez) | 0,15 a 0,25 A         |
| <b>Pico total</b>                   | <b>cerca de 0,6 A</b> |

Uma fonte de **2 A** tem folga de sobra; 3 A deixa margem para acessórios futuros.

## D5. Opção C — bateria, power bank e "nobreak"

- **Power bank no USB:** funciona para uso portátil ou demonstração. Alguns modelos **desligam sozinhos** quando o consumo é baixo; teste o seu antes.
- **Autonomia estimada:** o dispenser gasta em média ~0,15–0,2 A em 5 V ( $\approx 1$  W). Um power bank de **10.000 mAh** dura algo em torno de **30 horas**. É uma estimativa: para ter o número real, meça com um medidor USB de corrente.
- **"Nobreak" simples:** um power bank com **carga e saída ao mesmo tempo** (*pass-through*) fica ligado na tomada e alimenta o dispenser; se a luz cair, ele segura o funcionamento sem interrupção. Confirme essa função na descrição do produto.
- **Bateria de lítio (18650) + módulo elevador para 5 V:** opção para uma versão futura, com carregador e proteção próprios.

## D6. Falta de energia e de internet

| Situação                           | O que acontece                                                                                                                          |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Energia cai</b>                 | Cadastro, horários, contatos e histórico <b>ficam salvos</b> . Horários que passarem com o dispenser desligado <b>não tocam</b> depois. |
| <b>Energia volta, com internet</b> | Conecta no Wi-Fi, acerta a hora pela internet e volta ao normal.                                                                        |
| <b>Energia volta, sem internet</b> | ⚠ <b>Sem hora certa, os alarmes não tocam</b> até a internet voltar. É a principal limitação da versão atual.                           |
| <b>Internet cai, energia ok</b>    | O relógio interno continua contando: <b>os alarmes tocam normalmente</b> . Só as mensagens do Telegram não saem.                        |

O caso "energia volta sem internet" é justamente o que o módulo de relógio resolve.

## D7. Sugestão: módulo de relógio DS3231

💡 **Recomendação para a próxima versão:** incluir um **módulo de relógio de tempo real (RTC) DS3231**, para que o dispenser **saiba a hora mesmo sem internet**, inclusive logo depois de uma queda de energia.

**O que é:** uma plaquinha com um relógio de alta precisão e uma **bateria tipo moeda (CR2032)**. Ela continua contando o tempo por anos, mesmo com o dispenser desligado.

| Característica   | Valor                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Precisão         | ±2 ppm (cerca de 1 minuto por ano)                         |
| Comunicação      | I2C, endereço 0x68 (não conflita com o LCD, que usa 0x27 ) |
| Alimentação      | 3,3 V (pino 3V3 do ESP32)                                  |
| Bateria          | CR2032, dura anos                                          |
| Preço aproximado | R\$ 15 a R\$ 30                                            |

**Ligação:** no **mesmo barramento I2C do LCD**, em paralelo. Veja a caixa tracejada no diagrama da seção D4.

| DS3231 | ESP32                            |
|--------|----------------------------------|
| VCC    | 3V3                              |
| GND    | GND                              |
| SDA    | GPIO 21 (junto com o SDA do LCD) |
| SCL    | GPIO 22 (junto com o SCL do LCD) |

⚠ Muitos módulos DS3231 vêm com um circuito que tenta **recarregar** a bateria. Com uma **CR2032 comum (não recarregável)**, isso pode estragar a bateria. Use uma **LIR2032** (recarregável) ou peça para alguém retirar o resistor/diodo de carga do módulo.

**Como o firmware usaria o módulo** (proposta; **ainda não está no código atual**):

1. **Ao ligar:** lê a hora do DS3231 e acerta o relógio do ESP32 na hora, sem esperar a internet. Os alarmes passam a funcionar imediatamente.
2. **Quando a internet estiver disponível:** busca a hora exata (NTP) e **corrige** o DS3231, para ele nunca se afastar da hora certa.
3. **Sem internet:** segue pelo DS3231. Os alarmes funcionam normalmente; só o Telegram espera a internet voltar.

Esboço, com a biblioteca `RTCLib` (Adafruit):

```
#include <RTCLib.h>
RTC_DS3231 rtc;

// no setup(), antes de conectar o Wi-Fi:
if (rtc.begin() && !rtc.lostPower()) {
    struct timeval agora = { (time_t)rtc.now().unixtime(), 0 };
    settimeofday(&agora, nullptr);           // relógio certo já ao ligar
}

// depois que o NTP acertar a hora (com internet):
rtc.adjust(DateTime((uint32_t)time(nullptr))); // mantém o DS3231 corrigido
```

Com o módulo, a linha "Energia volta, sem internet" da seção D6 passa a ser: **os alarmes tocam normalmente; só o Telegram espera a internet.**

## D8. Resumo: qual montagem usar

| Momento                      | Montagem                                                        |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Testes e atualizações        | Bancada: ESP32 no USB do laptop + servos na fonte separada (A2) |
| Transição / demonstração     | Opção A: carregador USB no ESP32 + servos na fonte separada     |
| Uso definitivo (após D1)     | Opção B: fonte única 5 V 2-3 A no VIN + servos + capacitor      |
| Proteção contra falta de luz | Opção C: power bank <i>pass-through</i> como "nobreak"          |
| Próxima versão (recomendado) | + módulo de relógio <b>DS3231</b> , para funcionar sem internet |